

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZDRÁTOVÁ ÚSTNÍ SPRCHA SE 3 REŽIMY



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY


TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Přečtěte si prosím tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

PARAMETRY PRODUKTU

-  Až 3 provozní režimy
 - Jemný, Normální a Pulzující
-  4 vyměnitelné koncovky (360°)
-  Lehký a kompaktní design
-  Vestavěná dobíjecí baterie
 - Zajišťuje až 1 hodinu provozu (několik desítek dvouminutových cyklů).
-  Objem nádržky: 220 ml
-  Výkon a tlak
 - 2500 pulzů za minutu
 - Regulace tlaku 50–125 PSI (2,75–8,5 bar)
-  Materiál: odolný plast
-  Barva: dle skladové dostupnosti
-  Rozměry: 28 × 6 cm
-  Hmotnost: cca 249 g
-  Nabíjecí napětí: 5 V
-  Nabíjecí proud: 1 A
-  Jmenovité napětí: 3.7 V
-  Jmenovitý výkon: 3.5 W

POPIS PRODUKTU

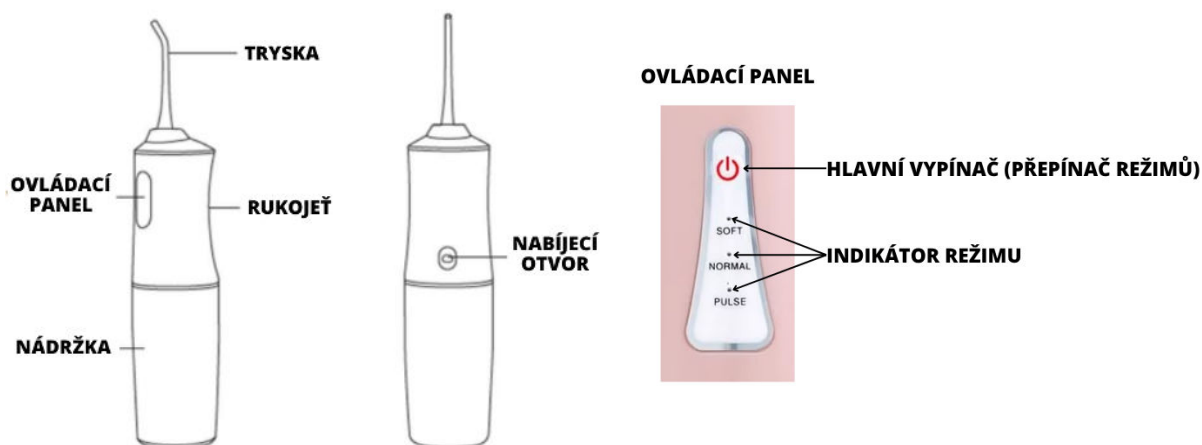



NABÍJECÍ KABEL

TRYSKY:

- 1. Standardní tryska:** pro každodenní čištění.
- 2. Čistič dásní:** speciálně pro čištění dásní.
- 3. Čistič jazyka:** pro odstranění povlaku z jazyka.
- 4. Čisticí hlavice na rovnátka:** speciální nástroj pro čištění součástí rovnátek.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pro zabránění možnému zranění je důležité porozumět a dodržovat pokyny v tomto návodu. Proto se prosím seznámte s určeným použitím přístroje a uchovejte návod k použití.
- Přístroj používejte pouze k určenému účelu (přístroj určený k ústní hygieně). Nesprávné použití vede ke ztrátě záruky!
- Rozebírání a opravy zařízení doma jsou zakázány, představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vedou ke ztrátě záruky. V případě poruchy se obraťte na prodejce!
- Do nádržky nenalévejte tekutiny o teplotě vyšší než 40 °C, aby nedošlo k popálení!
- Nenamáčejte zařízení do vody, mohlo by dojít k poruše nebo poškození.
V případě náhodného namočení zařízení během nabíjení okamžitě vytáhněte adaptér ze síťové zásuvky a teprve poté vyjměte zařízení z vody!
- Nepoužívejte poškozený kabel nebo adaptér, poškozené příslušenství vyměňte!
- Nevystavujte zařízení působení slunečního tepla! Udržujte zařízení mimo dosah ohně a nenabíjejte ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla!
- Netlačte trysku silně na zuby nebo dásně, abyste předešli poranění.
- Zařízení skladujte na bezpečném místě, aby nedošlo k poškození vodou nebo mechanickému poškození v důsledku pádu.
- Nepokoušejte se připojit nebo odpojit nabíjecí kabel mokrými rukama.
- K nabíjení používejte adaptér vhodný pro místní síť.
- Nepoškozujte, nepřetahujte, neohýbejte ani nekrutěte nabíjecí kabel a dávejte pozor, abyste na něj nekladli těžké předměty a nestlačovali ho mezi jinými předměty! Před čištěním a použitím odpojte nabíjecí kabel ze zařízení!
- Skladujte na místě, které není příliš teplé ani vlhké, a nevystavujte silnému slunečnímu záření.
- Vyhněte se nabíjení v teplých a vlhkých místech, jako je například koupelna.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte kabel a adaptér.
- Zařízení neobsahuje žádné vyměnitelné nebo opravitelné součásti. V případě poruchy se obraťte na prodejce.
- Nepoužívejte zařízení bez trysky!

- Některé ústní vody mohou způsobit korozi zařízení, proto je vybírejte pečlivě a používejte pouze zředěné!
- Produkt byl vyvinut pro dospělé, děti jej nesmějí používat bez dozoru! Osoby s omezenou pohyblivostí nebo mentálními schopnostmi a děti mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědného dospělého, který jim poskytne příslušné pokyny týkající se bezpečného používání přístroje!
- Tento přístroj není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Osoby trpící onemocněním dásní a osoby, které podstoupily zubní chirurgický zákrok v posledních 2 měsících, by přístroj neměly používat.
- Při odpojování kabelu táhněte za zástrčku, nikoli za kabel!

POUŽÍVÁNÍ

Před použitím zařízení nabijte podle následujících pokynů.

1. Ruce, zařízení a kabel musí být suché. Připojte USB konektor k 5V adaptéru (není součástí balení, většina nabíječek mobilních telefonů je tímto adaptérem vybavena) a připojte jej k síti. Otevřete kryt nabíječky a připojte druhý konec USB kabelu k zařízení.

Doporučení:

Pokud kontrolka signalizuje, že baterie je vybitá, zařízení nabijte. Celková doba nabíjení je 3–4 hodiny, během nichž blikají kontrolky střídavě a signalizují nabíjení. Po dosažení plného nabití blikání ustane.

Použití ústní sprchy:

2. Připojte trysku k otvoru na konci zařízení.
3. Otočte nádržku doleva a sejměte ji ze zařízení.
4. Naplňte nádržku a zavřete víčko.

Zařízení zapnete krátkým stisknutím tlačítka. Dlouhým stisknutím tlačítka vyberte požadovaný režim. Režim můžete přepínat i během provozu.




Můžete si vybrat z následujících režimů:

- SOFT: Jemný, šetrný proud vody pro čištění citlivých zubů a dásní.
- NORMAL: Silný proud vody pro každodenní čištění zubů v normálním stavu a zdravých dásní.
- PULSE: Střídavý proud vody pro hlubkové čištění a masáž dásní.

Tip:


Na doporučení zubních lékařů by začátečníci měli první týden používat režim SOFT a poté, co si na něj zvyknou, vyzkoušet i jiné režimy.

5. Před použitím držte ústní sprchu ve svislé poloze a umístěte trysku do úst, přiložte k zubům/dásním a pootevřete ústa, aby mohla tekutina vytékat. Teprve poté stiskněte spouštěcí tlačítko

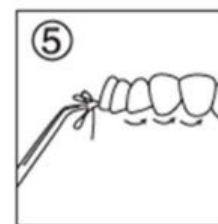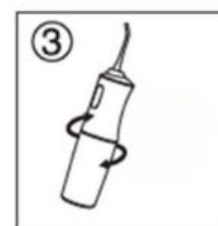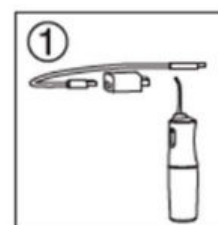

(aby nedošlo k postřikání vás a okolí). Při používání věnujte zvláštní pozornost následujícím bodům:

- a. Vodní paprsek musí svírat pravý úhel se zuby nebo dásní;
- b. Pomalu postupujte po celé délce chrupu, abyste řádně vyčistili všechny zuby i mezizubní prostory;

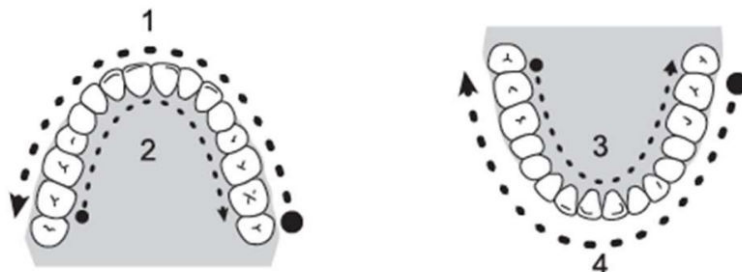

- c. Tryska musí přiléhat k okraji dásně a být rovnoběžná s dásní;



Tipy:

Nesměřujte proud vody přímo do dásňových kapes!

Po použití stiskněte tlačítko pro vypnutí.

Vestavěný časovač se po 2 minutách automaticky vypne, ale můžete jej restartovat stisknutím tlačítka.

6. Postup po použití:

- a. Vyprázdněte nádržku na vodu.
- b. Krátkým stisknutím tlačítka vyprázdněte zbývající tekutinu, poté přístroj vypněte a otřete do sucha.

Tipy:

Vyprázdněním zbytkové vody zabráníte množení bakterií.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, po vyschnutí jej vyčistěte.



ÚDRŽBA

Zařízení čistěte čistou vodou nebo neutrálním čisticím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní nebo drsné materiály ani vodu teplejší než 50 °C!

• Čištění přístroje

Přístroj čistěte suchým nebo vlhkým hadříkem, neponořujte jej do tekutiny za účelem čištění!

• Čištění nádoby

Nádoby lze čistit suchým nebo vlhkým hadříkem, případně opláchněte vodou.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyčistěte nádržku.

- **Čištění trysky**

Suchým nebo vlhkým hadříkem nebo odpojením a opláchnutím čistou vodou.

Trysku neohýbejte, netahejte za ni a neotáčejte s ní.

Na doporučení zubních lékařů **se doporučuje trysku vyměnit každé tři měsíce.**

PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

CHYBA	MOŽNÉ PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Přístroj se zastaví.	Po zakoupení nebo po delším skladování může dojít k nízkému stavu nabití akumulátoru.	Nabíjejte déle než 4 hodiny.
Nízký tlak vody nebo žádný proud vody.	Ucpání trysky.	Vyměňte trysku.
	Po zakoupení nebo po delším skladování.	Sejměte trysku ze zařízení a silně do ní vdechněte/vyfoukněte.
I s nabitou baterií lze přístroj používat krátkou dobu.	Akumulátor je opotřebovaný.	Obraťte se na prodejce.
	Nedostatečná doba nabíjení.	Nabíjejte déle než 4 hodiny.
Indikátor nabití nefunguje nebo funguje nesprávně.	Zařízení není napájeno.	Vyrovnejte/vyměňte nabíjecí adaptér a/nebo kabel.
	Porucha nabíjecího obvodu.	Obraťte se na prodejce.

LIKVIDACE

Nabíjecí baterie v zařízení je nebezpečným odpadem. Nepoužívané nebo vadné zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu, ale po zhodnocení místních předpisů a možností jej zlikvidujte vhodným způsobem (speciální část skládky, sběrný dvůr, sběrný elektronického odpadu).

Vyrobeno v Číně

Výrobce: Zhejiang Manrui International Trade Co., Ltd.

Adresa výrobce: Building No. 3, No. 300, Beiyuan Road, Beiyuan Sub-district, Yiwu City, Zhejiang, China, 322000

E-mail výrobce: 13335969501@qq.com

Název: TechWear s.r.o.

Adresa: Kurzova 2222/16, 155 00 Praha

E-mail: info@chinasourcing.cz

