

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

LIFTINGOVÝ PŘÍSTROJ NA OBLÍČEJ A KRK 7V1



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU


Jedná se o přístroj pro zkrášlení obličeje s EMS mikroproudem (galvanické ionty), vibracemi, hřejivou masáží a červeným, modrým a oranžovým světlem, který umožňuje hlubkové čištění, omlazení a lifting obličeje.

- ★ **EMS mikroproud** (galvanické ionty): Využívá princip nejjemnějšího impulzního proudu, anoda a katoda přitahují, změkčují a odvádějí mastnotu a nečistoty.
- ★ **Vibrace**: Fyzická vibrace a elektrická stimulace zvyšují elasticitu a zlepšují buněčný metabolismus.
- ★ **Teplá masáž**: Podporuje vstřebávání produktů péče o pleť, napíná texturu pleti a udržuje ji pružnou.
- ★ **Červené světlo**: Červené světlo o vlnové délce 650–680 nm proniká hluboko do dermis, zvyšuje krevní oběh, redukuje vrásky, zpevňuje pleť a podporuje tvorbu nových kožních buněk.
- ★ **Modré světlo**: Vlnová délka 430–450 nm má rychlý protizánětlivý účinek, snižuje tvorbu kožního mazu, odstraňuje akné a pupínky, zlepšuje mastnou pleť.
- ★ **Oranžové světlo**: Vlnová délka 590–610 nm proniká hluboko do pokožky 1–2 mm, účinně ošetřuje zarudlé skvrny, zmírňuje otoky, podporuje metabolismus kutikuly a zesvětluje pleť.

REŽIMY PŘÍSTROJE

CLEAN

Hřejivý pocit pomáhá otevřít póry, hlubkově čistit, aby se dosáhlo efektu zjemnění pórů, zmírnění akné a řešení tmavé pleti.

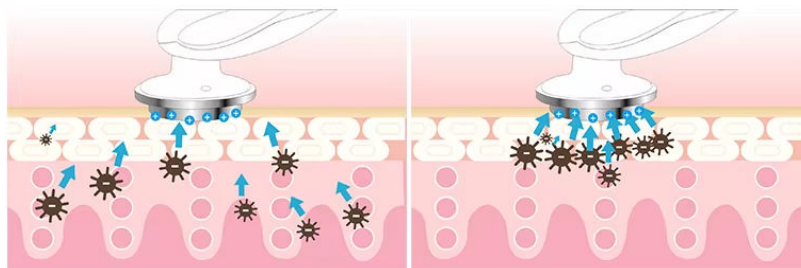

RF LED

Červené světlo může aktivovat elasticitu buněk, podpořit syntézu bílkovin a kostního kolagenu, spolupracuje s teplým ohřevem a vibrační masáží a vyhlazuje pleť.

ACNE-T

Modré světlo může redukovat akné, účinně potlačovat zánět kůže a vylučování kožního mazu a zvětšovat póry.





WHITEN

Oranžové světlo může doplnit energii buněk, urychlit metabolismus pokožky, aktivovat pleť, zjemnit ji a vyhladit.

IMPORT

Mikroproud a teplý ohřev vpravují produkty péče o pleť hluboko do pokožky, spolupracují s barevným světlem a vibrační masáží, způsobují, že spodní část pokožky dostatečně vstřebává živiny a pleť hydratuje a vyplňuje.




EMS UP

Mikroproudová masáž EMS podporuje krevní oběh, zvyšuje elasticitu a zpevnění pokožky a optimalizuje její stav.

EYE CARE

Teplá vibrační masáž ulevuje od únavy očí, vpravuje oční krém nebo esenci hluboko do pokožky a podporuje vstřebávání, díky čemuž jsou vaše oči okouzující.

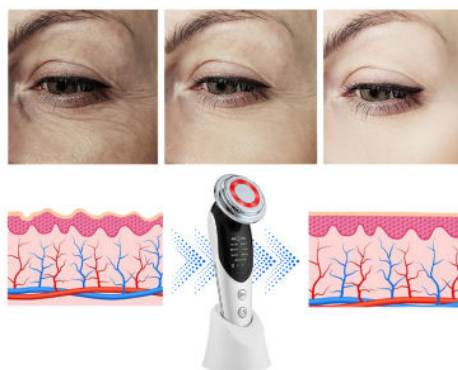

POPIS PŘÍSTROJE





BATERIE

BÍLÁ - NORMÁLNÍ
ČERVENÁ - SLABÁ BATERIE, POTŘEBA NABÍT
BLIKÁNÍ - NABÍJENÍ
SVÍCENÍ - PLNĚ NABITO



NASTAVENÍ INTENZITY

KRÁTKÝ STISK - ZMĚNA INTENZITY
DLOUHÝ STISK - VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ VIBRACÍ



TLAČÍTKO ON/OFF

KRÁTKÝ STISK - ZMĚNA MÓDU
DLOUHÝ STISK - VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

PARAMETRY

Rozměry	160 * 50 * 54 mm
Váha	100 g
Výstupní napětí	DC 5V/1A
Výkon	3W
Kapacita baterie	650mAh
Doba nabíjení	cca 3 hodiny
Rychlostní stupně	3
Obsah balení	Fixační kroužek, stojan, USB kabel, liftingový přístroj
Místo výroby	Čína

ZPŮSOBY POUŽITÍ

- K čištění a omlazení pleti nejprve použijte přístroj k čištění obličeje a poté použijte čisticí přípravek na obličej (není třeba používat přístroj). Hlubkové čištění odstraní nečistoty z hlubokých pórů na povrch pleti a poté nečistoty z povrchu smyjete čisticím prostředkem na obličej.
- Po 5 minutách nečinnosti v každém režimu se přístroj automaticky vypne. Používejte jej v souladu se způsobem použití a nepřetěžujte jej.
- Při používání je třeba držet proužky iontového senzoru na obou stranách trupu a dotýkat se pokožky hlavicí přístroje, aby se vytvořila smyčka. Během používání udržujte pokožku vlhkou, jinak přístroj nebude normálně fungovat.
- Pokud je třeba jej používat na obličejí ostatních, je třeba, aby se dotýkal uživatele a vytvořil smyčku, jinak přístroj nebude normálně fungovat.
- Dodržujte pokyny a používejte jej po stanovenou dobu.

1. JAK POUŽÍVAT REŽIM ČIŠTĚNÍ A PEELINGU (CLEAN)

- použití s čisticí vodou na pleť

Tento režim dokáže účinně vyčistit nečistoty v pórech a rozjasnit pleť.

Frekvence používání: 2-3krát týdně, u citlivé pleti je vhodné snížit frekvenci používání.

Doba použití: maximálně 4 minuty/1 čištění, u citlivé pleti 1-2 minuty/1 čištění.



2. JAK POUŽÍVAT REŽIM SE SVĚTELNOU TERAPIÍ (RF LED/ACNE-T/WHITEN)

- použití s tonikem, pleťovou vodou nebo sérem

Tento režim dokáže zvýšit buněčnou aktivitu, redukovat vrásky a pomáhá produktům péče o pleť hloubkově hydratovat pleť.


Frekvence používání: Lze používat denně - ráno a večer, v případě citlivé pleti lze frekvenci použití přiměřeně snížit.

Doba použití: maximálně 4 minuty/1 použití, u citlivé pleti 1-2 minuty/1 použití. Jakmile se přípravek na pleť vstřebá, přestaňte přístroj používat (na suché pleti nefunguje).

1. Aplikujte na pokožku denní tonikum nebo pleťovou vodu.



2. Zapněte přístroj (držte tlačítko 3 vteřiny) a zvolte program.

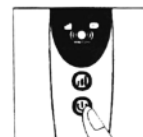

3. Držte přístroj přes senzorové proužky a postupujte po pokožce ze spodní části obličeje směrem nahoru.





3. JAK POUŽÍVAT REŽIM IMPORT

- použití s maskou, krémem

Tento režim dokáže pokožku jemně probudit a uvolnit, obnovuje její jas a vitalitu.

Frekvence používání: Lze používat denně.

1. Aplikujte masku na obličej.
2. Zapněte přístroj (držte tlačítko 3 vteřiny) a zvolte program "IMPORT".
3. Držte přístroj přes senzorové proužky a postupujte po pokožce ze spodní části obličeje směrem nahoru.

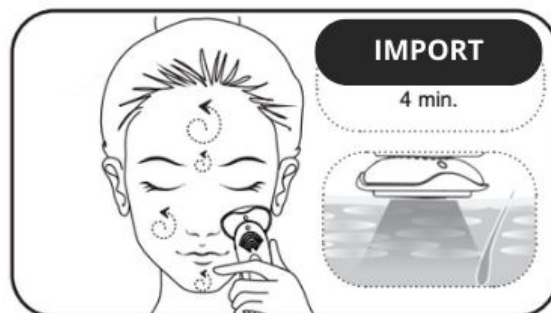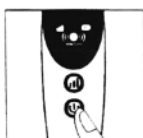

Nezůstávejte na stejném místě déle než 3 vteřiny, mohlo by dojít k podráždění pokožky.

4. Umyjte obličej vodou nebo zbylou masku vmasírujte do pokožky, aby se do pleti absorbovala.




4. JAK POUŽÍVAT REŽIM EMS

- použití s vodivým gelem/roztokem

Funkce EMS stimuluje obličejové svaly. Výsledkem je lifting a zpevnění pleti. **Frekvence používání:** 1-2 x za týden (jedinci s citlivější pletí 1x za týden)

Doba použití: 4-8 minut

1. Na aplikační hlavu přístroje naneste vhodný gel.
2. Zapněte přístroj (držte tlačítko 3 vteřiny) a zvolte program "EMS".
3. Dle potřeby a citlivosti pleti si můžete nastavit intenzitu galvanizace.
4. Podle obrázku projedte jednotlivé obličejové partie směrem zevnitř ven.

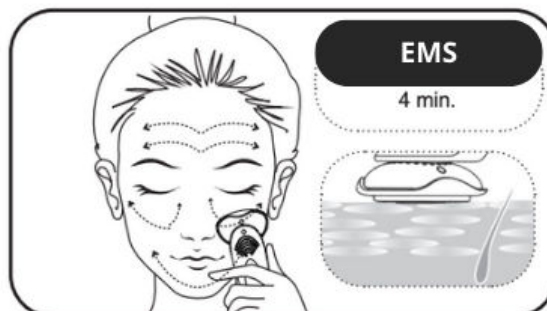


5. JAK POUŽÍVAT REŽIM PÉČE O OČI

- použití s očním krémem nebo sérem

Tento režim pomůže plně vstřebat oční krém nebo oční sérum.

Frekvence používání: Lze používat denně - ráno a večer, v případě citlivé pleti lze frekvenci použití přiměřeně snížit.

V případě potřeby je možné použít oční krém na oči.

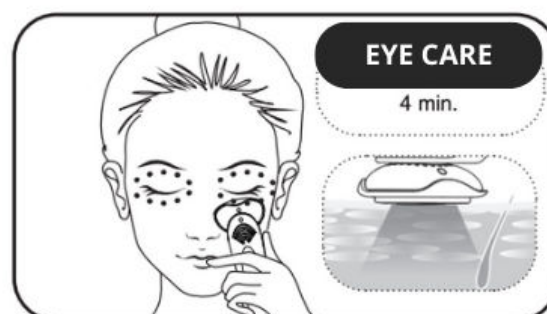


Doba použití: ne více než 4 minuty/1 použití, 1-2 minuty/1 použití pro citlivou pleť. Po vstřebání krému či séra přestaňte používat. Netlačte na suché oči.

1. Naneste produkty pro péči o oči (oční krém, maska, sérum).



2. Zapněte přístroj (držte tlačítko 3 vteřiny) a zvolte program "EYE CARE".

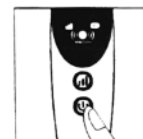

Držte přístroj, dotýkejte se rukou senzorových proužků na obou stranách přístroje a bodovou technikou stisku jemně masírujte hlavu od vnitřního koutku oka až po jeho konec. Červené světlo pro péči o oči je ve výchozím nastavení vypnuté. Červené světlo zapnete stisknutím tlačítka pro nastavení úrovně a poté jeho znovustisknutím zapnete modré světlo. Dalším stisknutím tohoto tlačítka světlo vypnete.



DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Brada

Masážní hlavici umístěte doprostřed brady a obloukovou technikou směrem ke spánkům masírujte konstantní rychlostí po dobu 2 sekund.



Obličejová linie

Umístěte přístroj na spodní část spánků a masírujte lícni kosti odspodu nahoru konstantní rychlostí po dobu 2 sekund.




Oči

U očního okolí použijte bodovou techniku, masírujte hlavou od vnitřního koutku oka ke konci oka a jemně masírujte bodově, v každém bodě setrvejte 2 sekundy, abyste snížili únavu a podpořili vstřebávání.



POHYBY PO OBLIČEJI

★ Pohyby na tváři jsou rozděleny do dvou částí: [1] a [2].

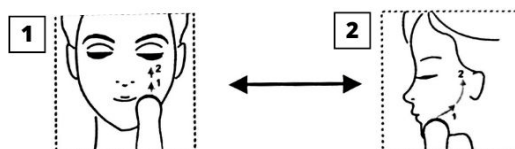

Umístěte masážní hlavici ke koutkům rtů a pohybujte od spodní části k horní části lícních kostí.

Umístěte masážní hlavici ke koutkům rtů a pohybujte obloukovou technikou směrem k ušním lalůčkům.

TIPY

Režim ranního probuzení

Probuzení pokožky + zmírnění otoků + nanesení make-upu

- Očistěte obličej
- Naneste tonikum, sérum a pleťovou vodu
- Zvolte režim omlazení světelnou terapií
- Naneste make-up

Noční regenerační režim

Podpora vstřebávání pokožky + silná výživa pleti + noční regenerace

- Hlubkové čištění (režim čištění a peelingu, 2-3krát týdně)
- Čištění obličeje
- Naneste tonikum, sérum a pleťovou vodu (režim omlazení světelnou terapií)
- Aplikace masky (režim teplého liftingu)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


1. Plastické operace obličeje a implantace podkožních kovových implantátů se neslučují s použitím tohoto přístroje. Během těhotenství jej používejte po konzultaci s lékařem.
2. Hlavici otírejte papírovým ubrouskem, nemyjte ji vodou a nedotýkejte se kovových předmětů.
3. Neumísťujte ji na vlhké místo, například do koupelny, aby nedošlo ke zkratu.
4. Tento přístroj je vhodný na obličej a krk, vyhněte se hnisavému a zánětlivému akné.

ÚDRŽBA

V případě potřeby údržby se ujistěte, zda je přístroj vypnutý. Pokud v zapnutém stavu použijete k údržbě mokré ručníky a papírové utěrky, může dojít k nehodě.

Neumývejte tělo přístroje

Přístroj se může porouchat. Otřete jej suchým hadříkem nebo měkkým hadříkem mírně navlhčeným (v případě většího znečištění můžete použít mýdlovou vodu).

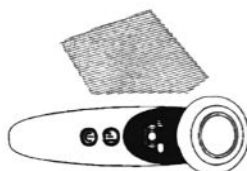

Očistěte kroužek hlavice

Pokud jsou na upevňovacím kroužku nečistoty, opláchněte jej čistou vodou.



K otírání těla přístroje nepoužívejte žíravé roztoky.

K otírání nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín, odlakovač na nehty apod., protože by mohlo dojít k rozbití výrobku.

