

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYHŘÍVANÁ MASÁŽNÍ PODLOŽKA DOMŮ I DO AUTA



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Masážní podložka poskytuje příjemnou uvolňující masáž celého těla. V matraci je zabudováno 5 výkonných vibračních masážních motorů řízené mikroprocesorem. Masážní matrace uvolňuje svalové napětí v oblasti zad, redukuje stres a navrácí zpět ztracenou energii. V neposlední řadě výrazně podporuje krevní oběh. Můžete si snadno nastavit intenzitu masáže. Masážní matraci využijete na cestách, doma nebo v kanceláři. Všude tam, kde potřebujete, bude stále s vámi.



BEZPEČNOST

- ! přístroj se nepokoušejte žádným způsobem rozebrat nebo sami opravovat
přístroj skladujte a používejte v suchém uzavřeném prostředí (je zakázáno používat přístroj v koupelně)
je zakázáno přístroj používat, pokud jste po operaci krční páteře nebo jiné části těla, pro kterou je masážní přístroj určen
je zakázáno přístroj používat, pokud máte závažné zdravotní chronické potíže s krční páteří a oblast šíje máte velmi citlivou
přístroj nepoužívejte příliš dlouho; stačí 5 až 10 minut denně pro příjemnou relaxaci a uvolnění svalstva; použití po delší dobu než je stanoveno by mohlo vyvolat bolest hlavy (v případě aplikace na krční páteř)
pokud si nejste jisti, konzultujte v krajním případě použití přístroje se svým praktickým lékařem;
přístroj nepotřebuje provádět žádnou zásadní mechanickou údržbu
před čištěním ovladače odpojte přístroj od napájecího adaptéru; povrch ovladače čistěte jen čistou měkkou utěrkou
nepoužívejte agresivní čisticí prostředky; mohlo by dojít k poškození povrchu ovladače; obalový materiál nenechávejte volně ležet; mohl by se stát dětem nebezpečnou hračkou
zacházejte s výrobkem opatrně; nevystavujte jej otřesům, úderům nebo nárazům;
povolená teplota okolního prostředí: 5°C až + 50°C
při škodách, které vznikly při zanedbání těchto bezpečnostních upozornění a pokynů k použití, zaniká jakýkoliv nárok na zajištění záruky přístroje; za následné škody vzniklé porušením těchto podmínek neneseme žádnou odpovědnost
- ! u škod na zdraví osob, které vzniknou nepřiměřeným nebo špatným zacházením s výrobkem, nepřebíráme žádnou odpovědnost; v těchto případech zaniká nárok na záruku výrobku

JAK PODLOŽKA FUNGUJE

V masážní podložce je zabudováno 5 výkonných vibračních masážních motorů řízených mikroprocesorem. Jsou rozmístěny tak, aby maximálně pokrývaly celá záda. Uživatel si může nastavit intenzitu masáže. Pokud je rychlost vibračních motorů nízká, masáž je jemná. Zvyšováním rychlosti lze postupně docílit silnější masáže. Obecně platí, že jemná intenzita slouží pro snížení stresu a celkové odstranění pocitu únavy. Vysoká intenzita masáže je naopak vhodná pro rychlé uvolnění ztuhlého svalstva. Vysoká intenzita masáže je vhodná například pro sportovce, kteří zvýšenou pohybovou aktivitou svaly více namáhají. Všechny funkce lze nastavit pohodlně pomocí dálkového ovladače. Matrace je vyrobena z měkkého materiálu, který je dostatečně vzdušný.



VLASTNOSTI

- ✓ 5 výkonných vibračních masážních motorů řízených mikroprocesorem.
- 8 automatických masážních režimů.
- Flexibilní tvar vhodný do většiny židlí a křesel.
- Tenký profil podložky.
- Možnost nastavení intenzity masáže (až 3 úrovně).
- Funkce vyhřívání.
- Dálkové ovládání.
- Rozměry: cca 120 × 50 × 4 cm.
- Hmotnost: 1,5 kg.
- Příkon: 18W.
- ✓ Napájení: adaptérem ze sítě 220V nebo 12V (součást balení).




MOŽNOSTI POUŽITÍ

Masážní podložku lze díky svému flexibilnímu tvaru používat téměř kdekoli. Je vhodná do většiny typů židlí a křesel. Masáž může probíhat také v horizontální poloze pro relaxaci vleže (na posteli nebo přímo na zemi). Používání matrace je velice jednoduché a intuitivní.


Matrace se aktivuje pomocí tlačítka ON/OFF. Na dálkovém ovladači se nastaví požadovaný masážní režim, intenzita masáže a doba činnosti. Intenzitu masáže je možné regulovat také sklonem, ve kterém se na matraci leží. Při vertikální poloze je intenzita nejnižší, v horizontální naopak nejvyšší, protože na matraci působí hmotnost celého těla. Funkce vyhřívání: teplo proniká hluboko pod pokožku a prohřáté svaly se uvolní mnohem rychleji.

POPIS PŘÍSTROJE

PODLOŽKA

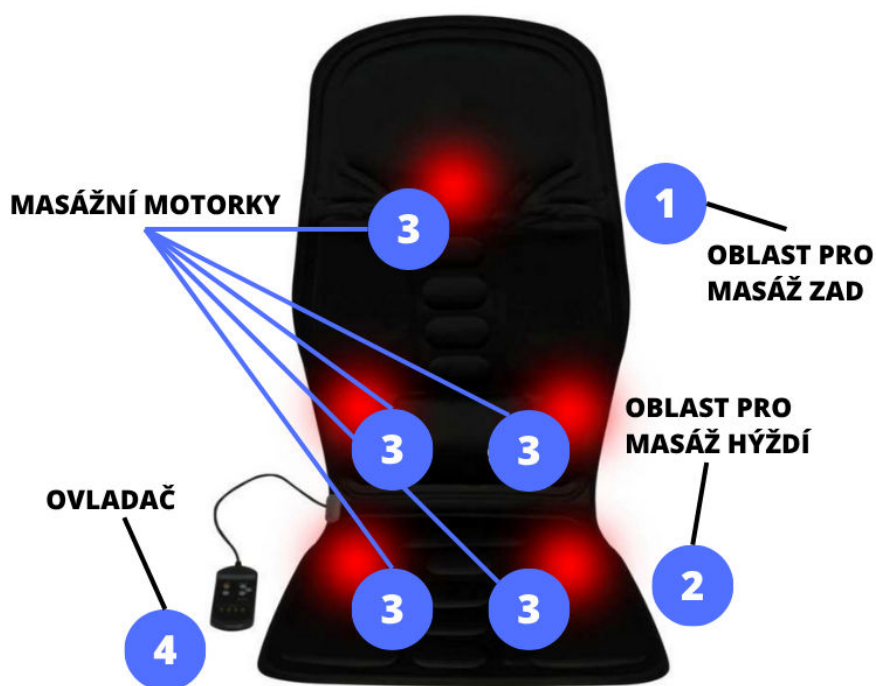

OVLADAČ

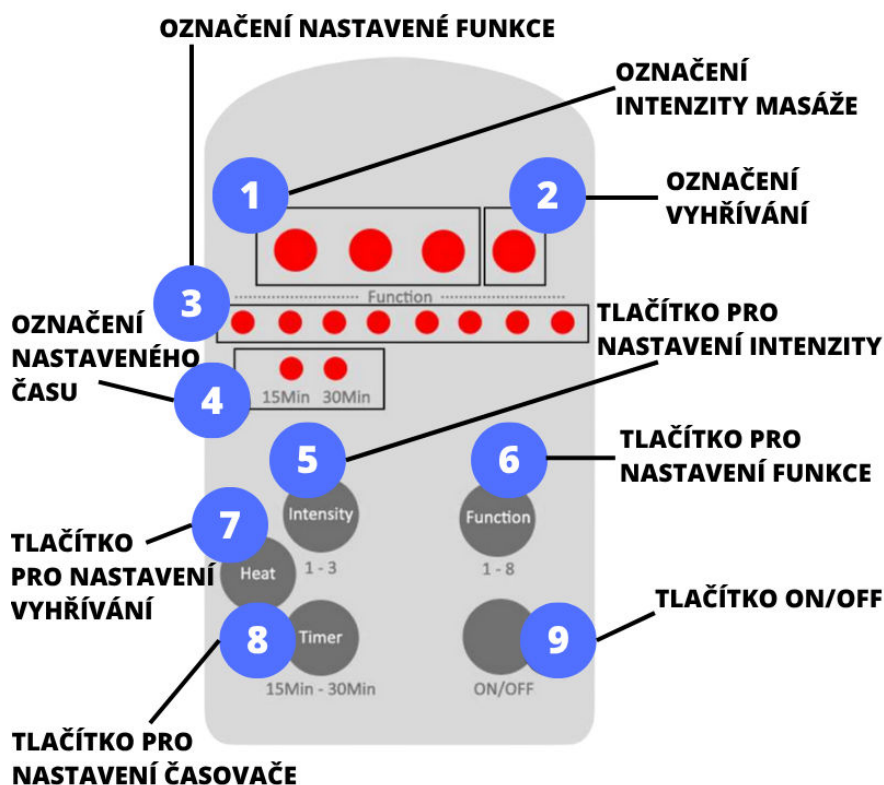

JAK POUŽÍT

1. Masážní podložku zapojte k příslušnému napájecímu adaptéru podle toho, kde chcete matraci používat. K dispozici jsou dva druhy adaptéru - do sítě 220V nebo zásuvky v automobilu 12V.
2. Masážní matraci zapnete stiskem tlačítka ON/OFF.
3. Pomocí tlačítka FUNCTION si můžete nastavit 1 z celkem 8 masážních programů - každý z nich střídá působení masážních motorků v různých oblastech těla různým způsobem. Aktuálně nastavenou funkci indikuje rozsvícená LED dioda.
4. Stisknutím tlačítka TIMER si můžete nastavit délku masáže: 15 nebo 30 minut. Délku masáže indikuje zapnutá dioda v horní části ovladače.
5. Stisknutím tlačítka INTENSITY si můžete nastavit 1 ze 3 úrovní intenzity masáže. Úroveň intenzity masáže indikují diody v horní části ovladače.
6. Stisknutím tlačítka HEAT můžete zapnout nebo vypnout funkci vyhřívání v oblasti zad. Vyhřívání indikuje dioda v horní části ovladače.
7. Tlačítkem ON/OFF matraci vypnete.

OBLASTI POUŽITÍ



RECYKLACE



Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.