

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

LED MASKA SE SVĚTELNOU TERAPIÍ
NA OBLIČEJ A KRK



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.

POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodách na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

TERAPIE FOTONOVÝM SVĚTLEM

Proč chodit na drahé chemické peelings a čištění pleti, laserové úpravy a výplně vrásek kyselinou hyaluronovou, když můžete pleť léčit z pohodlí vašeho domova? Ošetřující LED maska představuje inovativní způsob, jak se zbavit akné, vrásek, unavené pleti a dalších nedokonalostí. A to díky terapii fotonovým světlem, která patří v oblasti dermatologie mezi nejefektivnější nástroje v boji proti chronickým kožním defektům. Oproti laserovým ošetřením nezpůsobuje fotonové ošetření pomocí LED světla žádnou bolest či vedlejší účinky, které potřebují čas na zahojení.

JAK TO FUNGUJE

Světlo se dá zjednodušeně popsat jako viditelná část elektromagnetického záření různé frekvence. Dosahuje různých vlnových délek v intervalu od 390 do 760nm. Při této terapii proniká světlo do těla jako proud energie ve formě fotonů. Různé vlnové délky světla mají různé pozitivní účinky při péči o pleť.

VLNOVÉ DÉLKY SVĚTEL:

- **Červené světlo:** 630nm
- **Žluté světlo:** 590nm
- **Zelené světlo:** 520nm
- **Modré světlo:** 470nm



Použití této masky je velmi jednoduché, stačí si ji nasadit, upevnit elastickým páskem k obličeji a ovladačem nastavit intenzitu a dobu vybraného ošetření. Kolem otvorů na oči jsou jemné gumové šedé podložky, které zamezí nepříjemnému otlaku okolo očí. K masce na obličej se dá připojit i druhá maska, která ošetřuje pokožku krku. Ošetřující LED maska na obličej je vybavena 138 LED diodami, ošetřující LED maska na krk pak 54 LED diodami. Tyto diody produkují fotony právě s různými vlnovými délkami. Každá dioda má definovaný výkon a hodnotu světelného toku. Proto je důležité rozlišovat jednotlivé barvy diod. Jedna barva léčí akné, další vrásky, jizvy, zarudnutí, otoky - záleží na vaší preferenci. Součástí ošetřující LED masky je 7 galvanických elektrod (mikroelektronické masážní čudlíky), které je před prvním použitím nutné k masce přidělat. Masážní čudlíky napomáhají minimalizovat

vrásky a jemné linie a podporují cirkulaci krve. Na ovladači lze nastavit intenzitu mikroelektronického ošetření (tzv. Galvanický mód). Před nasazením masky doporučujeme snížit intenzitu na minimum. Pozor! Příliš vysoká intenzita může mít podobné projevy jako elektrický šok. LED diody na masce nepotřebují být měněny. Ovladač je nutno připojit k usb kabelu a napájecímu adaptéru (součástí balení).

ÚČINKY POUŽÍVÁNÍ

- ✓ Redukuje vrásky a předchází jejich výskytu
- ✓ Minimalizuje póry
- ✓ Bojuje proti akné
- ✓ Pomáhá bojovat proti mastnotě obličeje
- ✓ Zlepšuje pružnost pokožky
- ✓ Sjednocuje tón pleti
- ✓ Potlačuje tvorbu melaninu
- ✓ Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- ✓ Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků

HLAVNÍ FUNKCE:

- Přírodní světelné vlny zlepšují vzhled pokožky
- Každá barva světla je účinná na konkrétní ošetření pleti
- Různé možnosti režimu
- Snadné ovládání
- Lehce přenosné

MASKA JE VHODNÁ PRO TOHO, KDO:


- Zůstává vzhůru dlouho do noci a jeho pleť je tak unavená
- Sedí dlouho před počítačem a kouká se často do mobilního telefonu
- Nedodrží zdravý jídelníček, který zlepšuje stav pleti
- Má problematickou pleť: skvrny, akné, ucpané póry, matnou, nažloutlou, hrubou či ochablou pleť, aj.



UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ NEPOHODLÍ, LZE LED MASKU S KRKEM POUŽÍVAT I BEZ GALVANICKÝCH ELEKTROD.

POPIS MASKY

POPIS MASKY:

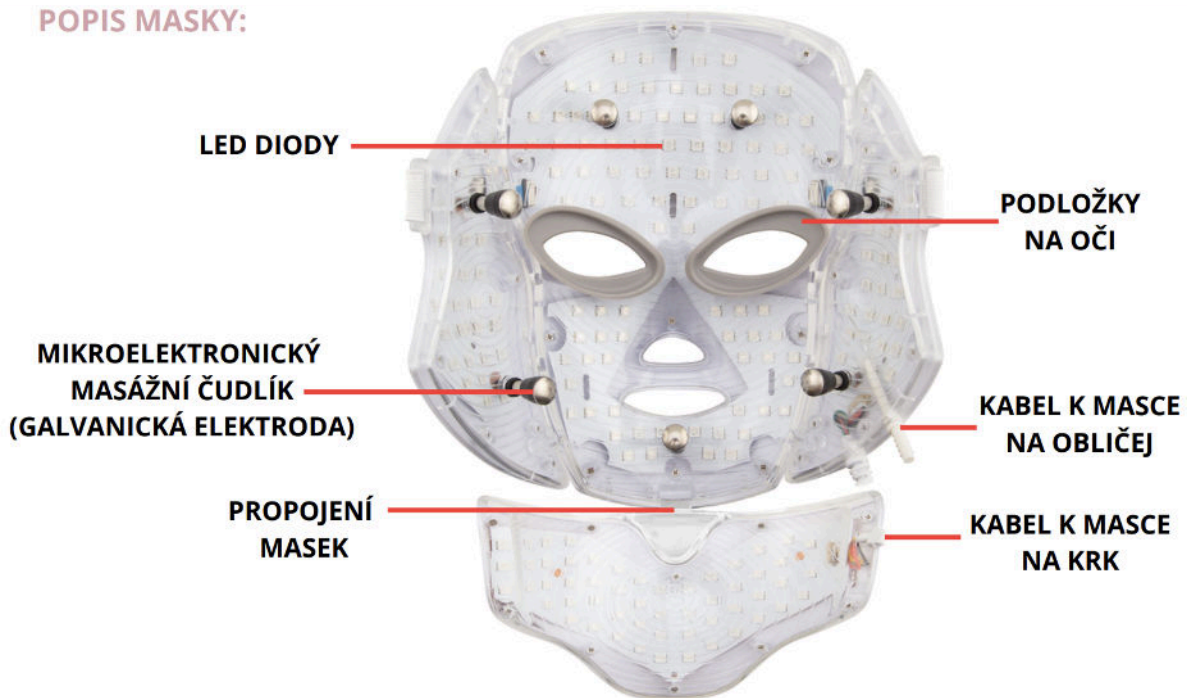


NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím masky vyzkoušejte veškeré funkce ovladače, aniž byste měli masku nasazenou na obličej. Snažte se vyvarovat přímému očnímu kontaktu se světlem vycházejícím z masky. Před použitím masky doporučujeme nastavit veškeré funkce na ovladači na minimum (viz popis ovladače "defaultně"). (příliš velká intenzita galvanického módu může mít podobné projevy jako elektrický šok!). Rovněž nastavte nižší dobu ošetření (viz doporučená doba 10 minut). K masce na obličej připojte masku na krk. Pomocí usb kabelů připojte obě masky k ovladači. Ovladač propojte s napájecím kabelem. Napájecí kabel musí být při používání masky v zásuvce. Přizpůsobte délku elastického pásku svému obličej a k masce přidělejte 7 mikroelektronických masážních čudlíků. Před nasazením masky důkladně očistěte pleť obličeje a krk a poté šetrně vysušte ručníkem. Ošetření pleti zahajte nastavením doby ošetření (pomocí tlačítek "time") a následně zvolte vámi požadovanou barvu ošetření (pomocí tlačítka color select/start). Nasadte si masku na obličej a začněte celý proces ošetření pleti fotonovou terapií.

POPIS OVLADAČE

POPIS OVLÁDAČE:

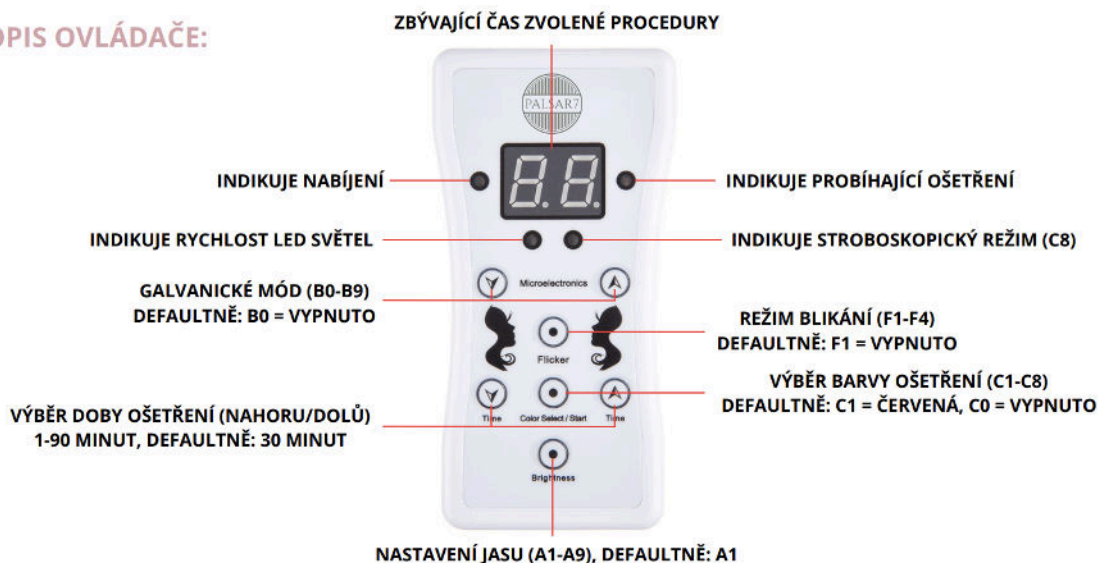

Maximální doba použití masky denně činí 45 minut. Chcete-li vyzkoušet několik ošetření během jednoho dne, počkejte mezi nimi alespoň 10 minut. Doporučená doba jednoho ošetření je 10-15 minut. Ideálně masku používejte 2-3x týdně. Pokud trpíte na citlivou pokožku, ekzémy, alergie nebo jste nachlazení, poraďte se před použitím masky s vaším lékařem.

ÚČINKY JEDNOTLIVÝCH SVĚTEL

1. **630NM-LED ČERVENÉ SVĚTLO: PROTI VRÁSKÁM**

- ☆ Bělící účinky
- ☆ Pro hebkou pokožku bez vrásek
- ☆ Vyhlazuje jemné vrásky, smršťuje póry
- ☆ Zlepšuje stav pokožky
- ☆ Podporuje přirozenou tvorbu kolagenu
- ☆ Zvyšuje účinnost vstřebávání účinných látek kosmetických přípravků
- ☆ Zlepšuje cirkulaci krve v podkožní tkáni
- ☆ Brání v tvorbě pigmentu

2. **590NM-LED ŽLUTÉ SVĚTLO: PROTI ZARUDNUTÍ, KE ZVÝŠENÍ IMUNITY**

- Zmírňuje hrubost pokožky a zarudnutí
- Zmírňuje kožní onemocnění
- Navíc zmírňuje horkost a podporuje zvýšení imunity
- Podporuje absorbování kosmetických přípravků
- Přispívá ke zlepšení buněčného metabolismu
- Zlepšuje detoxikační vlastnosti podpořením lymfatické činnosti
- Obzvláště účinný po intenzivním mechanickém peelingu
- Napomáhá zpomalování stárnutí kůže

3. **520NM-LED ZELENE SVETLO: PROTI UNAVE**

- ☆ Zlepšuje stav pokožky
- ☆ Vyrovnává barevný tonus pokožky
- ☆ Redukuje tvorbu mazu
- ☆ Zmírňuje duševní stres
- ☆ Snižuje výskyt edémů (otoků)
- ☆ Přispívá k eliminaci epidermálních pigmentových skvrn
- ☆ Zpomaluje produkci melaninu
- ☆ Má protizánětlivý účinek (zejména proti vzniku aknézní pleti)
- ☆ Vhodný pro všechny typy pleti

4. **470NM-LED MODRE SVETLO: PROTI AKNE**

- Účinně snižuje výskyt a léčí akné
- Zlepšuje stav pokožky, aniž by zanechávalo jizvy
- Aktivuje porfyriny (nastartují chemickou reakci, která ničí škodlivé bakterie)
- Má antibakteriální a protizánětlivý účinek

5. **LED SVETLE MODRE SVETLO (TZV. CYANINE): PODPORA METABOLISMU**

- ☆ Postupně zvyšuje buněčnou energii
- ☆ Podporuje metabolismus



6. **LED FIALOVÉ (RÚŽOVÉ) SVETLO: PROTI JIZVÁM PO AKNE**

- Kombinace červeného a modrého světla = kombinace dvou léčebných terapií
- Obzvláště účinná při léčbě jizev po akné

7. **LED BÍLÉ SVETLO: PROTI STÁRNUTÍ**

- ☆ Řeší stařecké skvrny a ochablou kůži
- ☆ Snižuje výskyt jemných vrásek

8. **STROBOSKOPICKÝ REŽIM - AUTOMATICKÉ STŘÍDÁNÍ SVĚTEL**

- Není doporučeno k pravidelnému užívání

UPOZORNĚNÍ

! Nevhodné pro děti do 14 let.

Zakázáno používat: těhotným ženám, kojencům, dětem, lidem s nachlazením, angínou či chřipkou, epileptikům, alergikům na světlo, pacientům s onemocněním štítné žlázy.

Před nasazením masky snižte intenzitu galvanického ošetření na minimum. Pozor! Příliš vysoká intenzita může mít podobné projevy jako elektrický šok.

Zakázáno používat lidem, kterým bylo po používání masky zle – navštivte svého lékaře a použití masky s ním zkonzultujte.

Při použití masky nekoukejte na televizi, nesurfujte na internetu, nečtěte knihu atd. – hrozí dlouhodobé poškození očí. Vyhněte se dlouhodobému přímému očnímu kontaktu se zdrojem světla.

Pokud hodláte zároveň s maskou použít i kosmetické přípravky, vybírejte kvalitní produkty s přírodním složením.

Po otevření krabice může maska mírně zapáchat, je to způsobeno tím, že je vyrobena z lékařského silikonu, zápach brzy vymizí.

Ať masku používáte na posteli nebo lehátku, vždy ji uchovávejte v krabici, zamezíte tak jejímu poškození.

K očištění masky nepoužívejte vodu, neponořujte masku do vody – k očištění použijte navlhčený hadřík. K očištění masky nepoužívejte žádné chemické přípravky.

! Nevystavujte masku přímo slunečnímu záření.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Input: 100-240vac, 50/60hz, Output: 12v(1a)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 1x LED maska na obličej,
- 1x LED maska na krk,
- 7x galvanická elektroda,
- 1x ovladač,
- 2x kabel usb,
- 1x napájecí adaptér

