

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UNIVERZÁLNÍ VYHŘÍVANÁ MASÁŽNÍ BANDÁŽ



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

POPIS

Bandáž je vhodná pro úlevu od bolesti ramenního kloubu a zotavení po zranění. Vestavěná infračervená vyhřívací podložka a vibrátor podporují krevní oběh a zmírňují bolest způsobenou omrzlinami ramene, natržením rotátorové manžety, vykloubeným zánětem svalů, ochrnutím, namožením, ztuhlostí a bolestivostí.

Vyhřívací podložka na ramena s teplotním režimem se snadno ovládá. Je dodávána s napájecím kabelem USB, který lze používat i doma zapojením do zásuvky pomocí adaptéru 5V 2A.



Tento vyhřívaný popruh je přizpůsobitelný a lze jej nosit na jakémkoli rameni. Délka popruhu je nastavitelná, ideální pro každý typ postavy.

Je vyrobena z vysoce kvalitního neoprenového materiálu, Ošetřeno proti riziku přehřátí. Tato vyhřívaná bandáž na rameno je ideálním dárkem pro někoho, kdo ho potřebuje. Je pohodlná.


Vhodné pro: koleno/stehno/holeně/ramena.

PARAMETRY

- Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů
- Široká škála aplikací
- Lehká
- 3 režimy ohřevu
- Napájení: USB-C (kabel součástí balení)
- Délka kabelu: 100 cm
- Barva: černá
- Délka: 42 cm
- Celková délka: ~62 cm
- Šířka: 23 cm



- Výstupní napětí USB: 5V/DC
- První stupeň (**červené** světlo), teplota je přibližně 44°C.
- Druhý stupeň (**modrá** kontrolka), teplota je přibližně 41°C.
- Třetí stupeň (**zelená** kontrolka), teplota je přibližně 38°C.
- Výstupní napětí adaptéru: 8,5 V/DC
- První rychlostní stupeň (**červená** kontrolka), teplota je 56-65°C,
- Druhý rychlostní stupeň (**modrá** kontrolka), teplota je 46-59°C,
- Třetí rychlostní stupeň (**zelená** kontrolka), teplota je 40-45°C.

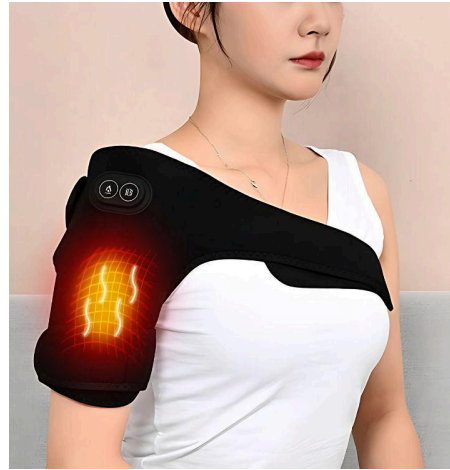

Poznámka: Při měření v různých podmínkách může dojít k odchylce o 2-4 °C! Nejedná se o chybu.

POUŽITÍ

Podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Stisknutím tlačítka zapnete/vypnete a klepnutím přepínáte režimy. Ideální použití při sledování televize nebo čtení doma na gauči.

Připojte pásek k výrobku na suchý zip. Po upevnění popruhu protáhněte popruh zezadu a zajistěte jej suchým zipem pod paží a hrudníkem. Zajistěte suchý zip a ujistěte se, že je pevně uchycen.



RECYKLACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OBALOVÝMI ODPADY

Použitý obalový materiál odevzdejte na místě určeném místními úřady k likvidaci.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ



Tento symbol umístěný na výrobcích nebo v jejich dokumentaci označuje, že použité elektrické a elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Tyto výrobky musí být předány na určené skládky k řádné likvidaci, odstranění a recyklaci. V některých zemích EU nebo jiných evropských zemích lze tyto výrobky místo toho vrátit místnímu prodejci při nákupu ekvivalentního nového výrobku. Správná likvidace těchto výrobků zachová cenné zdroje surovin a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může nesprávná likvidace odpadu způsobit. Další informace získáte na obecním úřadě nebo v nejbližším skladu odpadů. V případě nesprávné likvidace tohoto typu odpadu mohou být uloženy sankce v souladu s místními předpisy.

Likvidace výrobků v zemích Evropské unie

Pokud chcete vyřadit provoz elektrické a elektronické zařízení, získejte potřebné informace od prodejce nebo dodavatele výrobku.

Likvidace výrobků v zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat mimo EU, získejte potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů výrobku bez předchozího upozornění.

IMPORTER/EINFUHRER/DOVOZCE:

VERK GROUP SP. Z O.O. SP.K.

WYGODY 16

05-090 PODOLSZYN NOWY

POLAND

www.verkgroup.pl

www.internetowa-hurtownia.pl

www.internetowa-hurtownia.chh.pl