

VAKUOVÝ ČISTIČ PÓRŮ CLEANER KILPOR 2.0



Model č.: XN-8030

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Informace pro uživatele

Děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod, abyste se seznámili s tím, k čemu je tento výrobek určen a co je nutné vědět. Výrobek vždy používejte podle tohoto návodu. Předejdete tím případnému poškození výrobku a zranění osob. Uchovejte si prosím tento návod pro pozdější použití.

Základní informace o výrobku

Tento vakuový čistič pórů je kosmetická pomůcka s funkcí mikrodermabraze. Čistí póry a zbavuje vaši pleť kožního mazu a dalších nečistot. Tento přenosný kosmetický pomocník je dodáván se 4 vyměnitelnými odsávacími hlavicemi (pleťový peeling, zpevňování obličejové pokožky, čištění pórů, odstraňování černých teček a akné, odstraňování vrásek). Vakuový čistič pórů Kilpor 2.0 nabízí 5 stupňů intenzity sání, které uspokojí potřeby každého uživatele.

Technické specifikace

Model č.: XN-8030

Rozměry výrobku: 180*40*39 mm

Výkon: 0,7 W

Vstupní napětí: DC 5 V

Jmenovitý proud: ≤ 500 mA

Kapacita baterie: 1000 mA

Doba nabíjení: cca. 90 min

Provozní doba: cca 2,5 hodiny

Balení obsahuje:

1. 1x hlavní jednotka
2. 4x multifunkční hlavice (1x velká kruhová hlavice, 1x malá kruhová hlavice, 1x elipsovité hlavice, 1x hlavice se sací sondou)
3. 1x balení houbiček a pryžových kroužků
4. 1x USB nabíjecí kabel
5. 1x uživatelská příručka



Informace o součástech



1. Vyměnitelná hlavice
2. Přepínač výkonu (5 stupňů intenzity)
3. LED indikátor dobíjení
4. Vstup pro nabíjení



Pro nabití spotřebiče připojte USB kabel do nabíječky (není součástí balení) či k počítači. Během nabíjení bude svítit červené světlo. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zelená dioda.

Informace o hlavicích

Čtyři různé hlavice



Zkrášlete si pleť mikrokrystaly

Hlavice s mikrokrystalickými částicemi je určena k čištění pleti a odstraňování odumřelé pokožky.

Velká kruhová hlavice (intenzivní odsávání)

Tato hlavice se silným odsáváním je určena pro odstraňování mikrokomedonů, kožního mazu, zbytků kosmetiky a podobně. Lidé s citlivou či tenkou kůží by však měli být při používání této hlavice opatrní. Tato hlavice by se měla používat jednou týdně po dobu pěti minut v závislosti na stavu pokožky.



Malá kruhová hlavice (mírné odsávání)

Tato hlavice je určena pro odstraňování mikrokomedonů, kožního mazu, pudru, zbytků kosmetiky a podobně. Je vhodná pro citlivou pokožku, neboť sací výkon je relativně mírný.

Elipsovité hlavice (mírné odsávání)

Tato hlavice s malým elipsovitým zakončením je určena pro každodenní péči o pokožku. Na malou chvíli aplikujte hlavici na vrásky kolem očí a úst a pak se hlavicí od pokožky zase vzdalte. Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Také ji můžete pohybovat nahoru a dolů pro lifting pokožky.




VAROVÁNÍ

1. Před manipulací s výrobkem se ujistěte, že jsou váš obličej i ruce naprosto suché. Pokud by se do přístroje dostala jakákoliv tekutina, došlo by k jeho poškození.
2. Ujistěte se, že je filtrační houbička správně vložena do filtračního kalíšku, že je suchá a není v ní žádná voda ani jiná tekutina. Pokud je vaše pleť vlhká nebo mokrá, důkladně ji osušte. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že se nečistoty, voda či jiná tekutina dostanou do čerpadla, přístroj se ucpe a nebude fungovat správně.
3. Tento spotřebič není určen pro použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, sensorickými či mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud nemají k dispozici pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče. Se spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou pod dohledem.
4. Tento přístroj není určen k použití na místech, která byla operována nebo jsou na nich jizvy. Stejně tak se používání tohoto výrobku nedoporučuje těhotným ženám a lidem trpícím srdečními chorobami.
5. Varování: chraňte výrobek před kontaktem s vodou a neomyvejte ho.
6. Při používání tohoto výrobku nenoste náhrdelníky, náušnice ani žádné jiné šperky. Před použitím výrobku je třeba náhrdelníky, náušnice a jakékoliv další šperky odložit.
7. Pokud při používání tohoto výrobku pocítíte bolest, okamžitě jej přestaňte používat.
8. Tento výrobek není zdravotnickým prostředkem. Žádná součást tohoto výrobku by neměla být využívána pro zdravotní poradenství, lékařskou diagnózu ani léčbu.
9. Tento výrobek není vodotěsný a neměl by být používán ve sprše ani v žádných jiných prostorách s velkým množstvím vody. Přístroj neponořujte do vody.
10. Neuchovávejte tento výrobek v koupelně ani jiné místnosti se zvýšenou vlhkostí.
11. Neskladujte ani nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla či ohně.
12. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka a děti by jej neměly používat. Přístroj neuchovávejte v místech, kam mají děti přístup.
13. Nepoužívejte výrobek na podrážděnou pokožku. Pokud dojde k podráždění pleti, přestaňte výrobek používat.
14. Při manipulaci s přístrojem v blízkosti očí dbejte zvýšené opatrnosti.
15. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití zasucho.
16. Nikdy výrobek nepoužívejte bez sací hlavice nainstalované na sací trysce.
17. Pravidelně odstraňujte prach, chmýří, chloupky a jiné nečistoty, které mohou výrazně snížit sací výkon nebo celkovou funkčnost přístroje.
18. Pokud výrobek nepoužíváte, uchovávejte ho v chladnu a suchu.
19. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak by měl, spadl na zem, byl poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, nepoužívejte jej.
20. Tento přístroj by neměl být nikdy zapnutý během čištění, výměny příslušenství, nebo pokud není používán.
21. V případě poruchy nebo poškození se nepokoušejte o opravu sami a zajistěte, aby byl výrobek řádně zlikvidován v souladu s místními zákony.

Instalace kosmetické sondy

Vložte filtrační houbičku do filtračního kalíšku (viz obrázky):

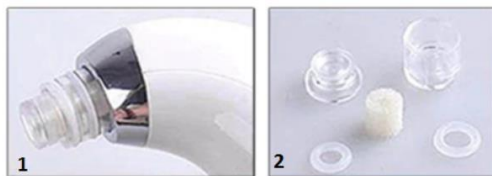

Nejprve vyjměte sací hlavici. Uchopte hlavici a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček.

Nyní uchopte uzávěr trysky, otočte jím ve směru hodinových ručiček a pak jej vytáhněte.

Odstraňte starou filtrační houbičku z filtračního kalíšku a vložte novou.

Ujistěte se, že je filtrační houbička v kalíšku dobře usazena. Uzávěr trysky nasadte zpět na trysku (otočte uzávěrem ve směru hodinových ručiček).



Nyní můžete sací hlavu vrátit zpět na místo. Uchopte hlavici a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne zpět do trysky.

Pokud je silikonový kroužek poškozen nebo je filtrační houbička špinavá, vyměňte požadovanou součástku za novou (viz pokyny výše).

Než začnete

Poznámka: Je velmi důležité, abyste výrobek používali správným způsobem!

Před použitím výrobku je třeba póry "otevřít" horkou vodou (nejlépe aplikací horkého ručníku po dobu několika minut), aby se nečistoty daly snadno odsát.

- Před použitím výrobku aplikujte na pokožku po dobu pěti minut horký ručník či gel/krém na odstranění černých teček, aby se póry nejprve zcela otevřely. Tím zajistíte nejlepší možný výkon přístroje.
- Ujistěte se, že póry jsou po horké koupeli nebo cvičení zcela otevřené a udržujte svůj obličej dostatečně vlhký.
- Pohybujte přístrojem pomalu po pokožce. Nesetrvávejte dlouho na jednom místě, abyste si neporanili pokožku. Přístroj dokáže odsát kožní maz, mikrokomedony, akné a černé tečky, které nejsou usazené příliš hluboko v kůži. Pokud jsou černé tečky usazené hluboko, doporučujeme používat tento výrobek společně s pleťovou vodou.
- Péči o pokožku můžete podpořit pomocí pleťového tonika či studené vody, jíž póry zmenšíte.





KROK 1: Odstraňte make-up a vyčistěte si obličej.

KROK 2: Napařte si obličej pomocí teplého ručníku nebo napařovacího přístroje, abyste si otevřeli póry.

KROK 3: Pro uvolnění černých teček naneste na pokožku trochu pleťové vody.

KROK 4: Podle vašich potřeb si vyberte jednu ze čtyřech odsávacích hlavic. Začněte s nejnižší úrovní sacího výkonu.

KROK 5: Po pórech pohybujte hlavicí neměnnou rychlostí sem a tam. Postupujte pomalu a nesetrávejte na jednom místě příliš dlouho, abyste si neporanili pokožku. Přístrojem na pokožku netlačte ani jím nepohybujte svislým směrem. Nezůstávejte na jednom místě déle než tři vteřiny, jinak na vaší pleti zůstanou rudé stopy a podlitiny.

KROK 6: Po vyčištění obličeje aplikujte na ošetřené póry ručník s ledem, studenou vodu či esenci pro šetrnou péči o pleť. Po čištění použijte obličejovou masku, aby se póry co nejvíce stáhly.

Jak správně zvolit úroveň sacího výkonu?

Vakuový čistič je určen pro různé typy pokožky. Úrovně 1 a 2 (mírný stupeň odsávání) jsou vhodné pro citlivou a suchou pokožku. Přístroj poprvé použijte s kosmetickou sondou. Úroveň 3 (střední stupeň odsávání) je vhodný pro neutrální pokožku. Úroveň 4 (vysoký stupeň odsávání) je určen pro mastnou pokožku. Úroveň 5 (nejvyšší stupeň odsávání) je určen pro smíšenou pokožku s velkými póry.

Pokud tlačítko napájení stisknete jednou, přístroj se přepne na úroveň 1 (mírný stupeň odsávání). Pokud tlačítko napájení stisknete dvakrát, přístroj se přepne na úroveň 2 (mírný stupeň odsávání). Pokud tlačítko napájení stisknete třikrát, přístroj se přepne na úroveň 3 (střední stupeň odsávání). Pokud tlačítko napájení stisknete čtyřikrát, přístroj se přepne na úroveň 4 (vysoký stupeň odsávání). Pokud tlačítko napájení stisknete pětkrát, přístroj se přepne na úroveň 5 (nejvyšší stupeň odsávání). Pokud tlačítko stisknete šestkrát, přístroj se vypne.

Dermaabrazie obličejové pokožky

1. Vyčistěte pokožku obličeje mikrokrytalovou sondou a pak ji osušte.
2. Začněte od čelisti a pohybujte přístrojem odzola nahoru.
3. Přiložte přístroj na tvář a pohybujte jím od středu k oběma stranám.
4. Umístěte přístroj na čelo a pohybujte jím od středu ke spodní straně.
5. Umístěte přístroj do zóny 1 a pohybujte jím zdola nahoru.

Zbavte se mikrokomedonů, kožního tuku, zbytků kosmetiky a dalších nečistot

- 1) Použijte velkou nebo malou sondu (vyberte nástavec dle stavu vaší pokožky).
- 2) Umístěte otvor hlavičky k té oblasti pokožky, kterou chcete ošetřit, a pak hlavicí začněte pohybovat jedním směrem. Nepohybujte jí tam a zpět a nepoužívejte ji ani příliš dlouho.



Péče o jemné vrásky

- 1.) Použijte elipsovitou hlavici
- 2.) Nastavte sací výkon podle potřeby ošetřete přístrojem koutky očí, nos, ústa a další části obličeje.
- 3.) Hlavici několik vteřin aplikujte na zvolenou oblast obličeje a pak se od pokožky zase vzdalte. Tento postup opakujte po dobu 5 minut.

Poznámky:

- Nezapomínejte s přístrojem hýbat; nezůstávejte na jednom místě příliš dlouho.
- Před použitím výrobku aplikujte na pokožku po dobu pěti minut horký ručník či gel/krém na odstranění černých teček, aby se póry nejprve zcela otevřely. Tím zajistíte nejlepší možný výkon přístroje.

UPOZORNĚNÍ: Neodsávejte nečistoty sáním pouze z jednoho místa, kůže by totiž mohla zčervenat či zfialovět. Pokud zfialoví či opuchne, přestaňte výrobek okamžitě používat. Připravte si studený a poté horký obklad, případně následující den navštivte lékaře.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ: Nikdy se s přístrojem nezdržujte na jednom místě delší dobu. Na jednom místě jej používejte maximálně po dobu tří vteřin. Nepoužívejte přístroj na pokožku ve vertikální poloze. Vždy jím posouvejte dopředu či dozadu, aby jste zabránili zčervenání a podráždění pokožky.



Údržba

Po každém použití opláchněte odsávací hlavici teplou vodou. Sací hlavici nechte oschnout. Nečistěte hlavní jednotku vodou – není voděodolná. Očistit ji můžete měkkým navlhčeným hadříkem.

UŽITEČNÉ TIPY

- Po použití čističe se ujistěte, že na ošetřenou pokožku aplikujete hydratační krém.
- Před a po použití výrobku nepoužívejte pleťové čistící ani peelingové přípravky.
- Při používání vakuového čističe pórů jím na pokožku netlačte příliš. Jeho odsávací výkon bohatě stačí k účinnému vyčištění pórů.

Mírné zarudnutí pokožky je zcela normální a po krátké době vymizí.

POZNÁMKA: Vakuový čistič pórů lze používat jednou týdně na suchou pokožku. Na mastnou a smíšenou pleť ho lze používat dvakrát týdně. Nepoužívejte výrobek déle než pět minut denně.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

- Pokud spotřebič nefunguje, ujistěte se, že je odsávací hlavice správně nainstalována, a zkontrolujte, zda některá ze součástí nepotřebuje vyčistit.
- Pokud spotřebič pracuje pomaleji, vyčistěte odsávací hlavici a výrobek nabijte.

Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku



Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován spolu s jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady, je nutné tento výrobek zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého výrobku využijte prosím sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a odevzdat k recyklaci, která je bezpečná pro životní prostředí.



Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních předpisů Evropské unie.